

保管用

保証書別添

# NAIS エアー式快適マットレス エアロラックス

EU2051

## 取扱説明書




お買い上げありがとうございました。


- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

 **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例







○記号は、**禁止**の行為を示しています。  
(左図の場合は分解禁止)






●記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。  
(左図の場合は必ず守る)




お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 <b>警告</b>	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>●マットレスの上で遊んだり、飛び跳ねたりしないでください。</li><li>●「こし」に次のような異常がある方は「こし上げストレッチ」は使用しないでください。<ul style="list-style-type: none"><li>・腰痛、骨そしょう症など「こし」に異常のある方</li><li>・背骨に異常のある方、背骨のまがっている方</li><li>・背骨を手術したことのある方</li><li>・上記以外に特に身体に異常を感じているとき</li></ul></li><li>●「こし上げストレッチ」は、うつ伏せまたは横向きでは使用しないでください。 事故やけがのおそれがあります。</li></ul>
 電源プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"><li>●お手入れのときには必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 守らないと感電ややけどのおそれがあります。</li></ul>
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"><li>●必ず交流100Vで使用してください。 守らないと火災・感電のおそれがあります。</li></ul>

## **警告**

 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火のおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったりしない。また重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電のおそれがあります。</li></ul>
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。</li></ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>●絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。</li></ul>

## **注意**


 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>●このマットレスは一人用です。二人以上での使用はしないでください。 破損し、けがの原因となります。</li></ul>
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグは確実に差し込んでください。 差し込みが確実でないとショートや発火の原因となります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 守らないと感電やショートして発火の原因となります。</li></ul>
 電源プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"><li>●長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。</li></ul>

# 特長


## 1 体型・体格・好みに合わせてマット硬さが選べる 「背・こし・あし、3分割エアーマットレス」

体型・体格の違いにより就寝時に体にかかる圧力は異なります。  
エアロラックスはマット硬さを変えて体圧を分散させます。


肥満気味の人

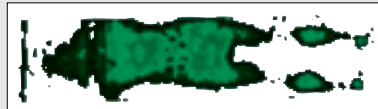

背中が平らな人

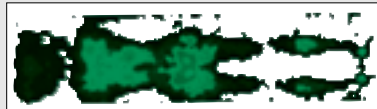


## 2 こし上げ機能で疲れスッキリ。

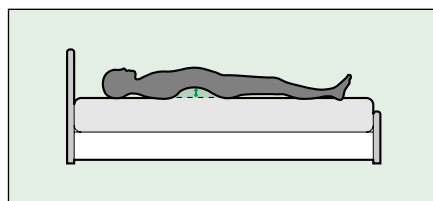

- 上下幅は2段階調整（高い／低い）。
- 1回の昇降に要する時間は約45秒。
- 15分タイマー付。

## 3 マット除湿機能付。

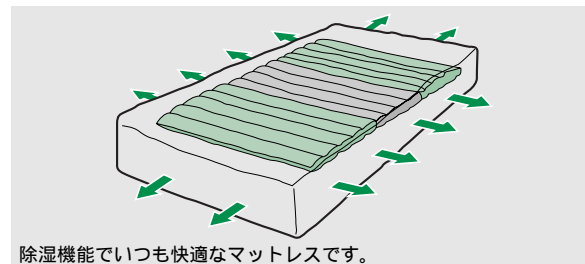

除湿機能でいつも快適なマットレスです。

### 使用上の注意

- マットレスは無理に折り曲げないでください。
- マットレスは鋭利なもので突いたり刺したりしないでください。
- 操作器は落下させたり、投げたり、重いものをのせたりしないでください。
- エアーがうまく入らず故障の原因になるため、エアーホースは折り曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
- 火災、変形・変質の原因になるため、ストーブなどの熱器具は近くで使用しないでください。
- 変形・変色の原因になるため、直射日光の当たる場所での使用は避けてください。

# もくじ

## 安全上のご注意

1

## 各部のなまえ

5

## 準 備

7

設置・接続のしかた .....7

## 使いかた

10

こんな順序で使います .....10

マットレスの準備.....11

表示ランプ・タイマー .....12

快適さを保つ「マット硬さ自動調節」...13

こしの疲れに「こし上げストレッチ」...15

さわやかに「マット除湿」 .....17

自分に合った「マット硬さ」に調節する ...18

## お知らせ

20

お手入れ.....20

故障かな?と思ったとき .....21

定格 / 仕様.....22



保証とアフターサービス .....裏表紙

# 各部のなまえ


( ) 内は主な参照ページです。

## マットレス

マットレス内部イメージ図

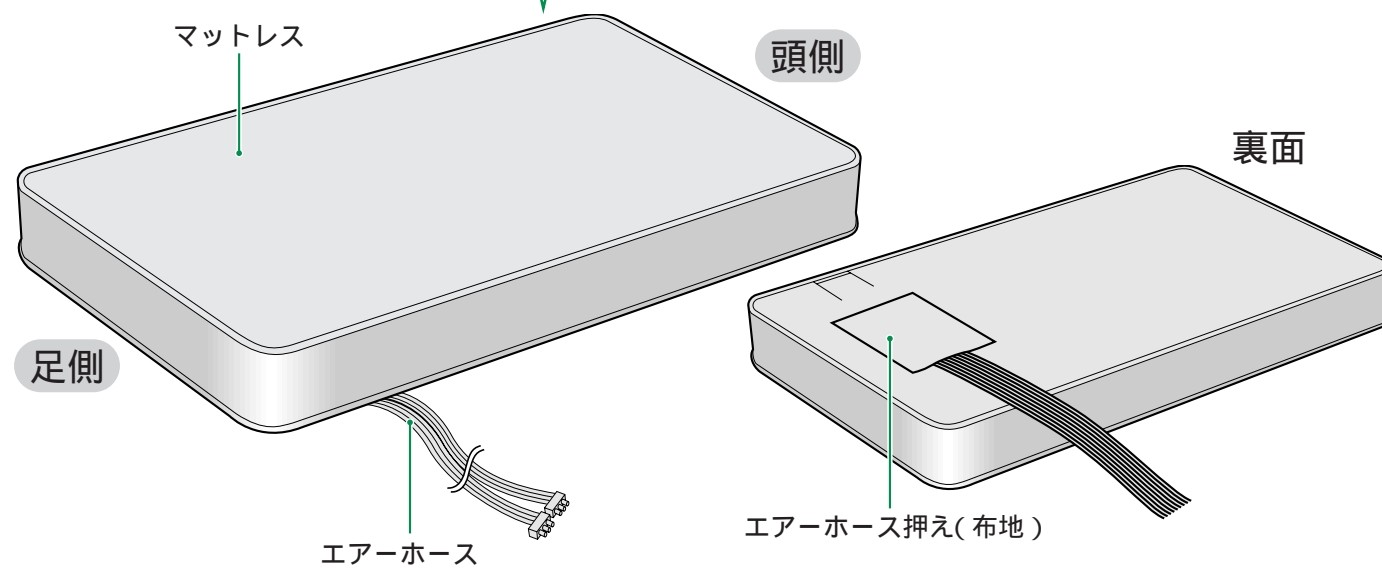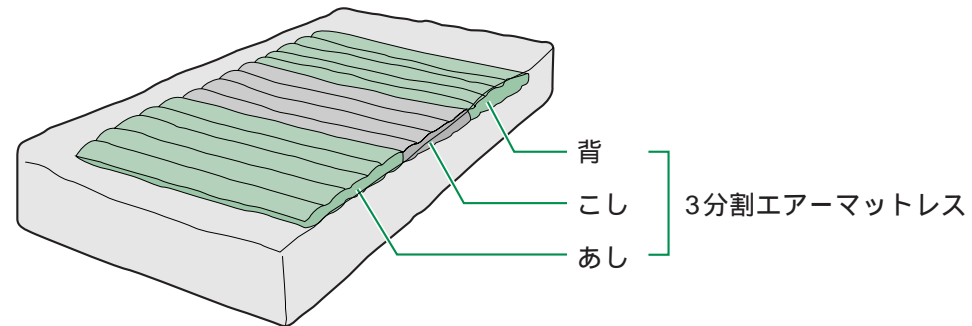


## 本体

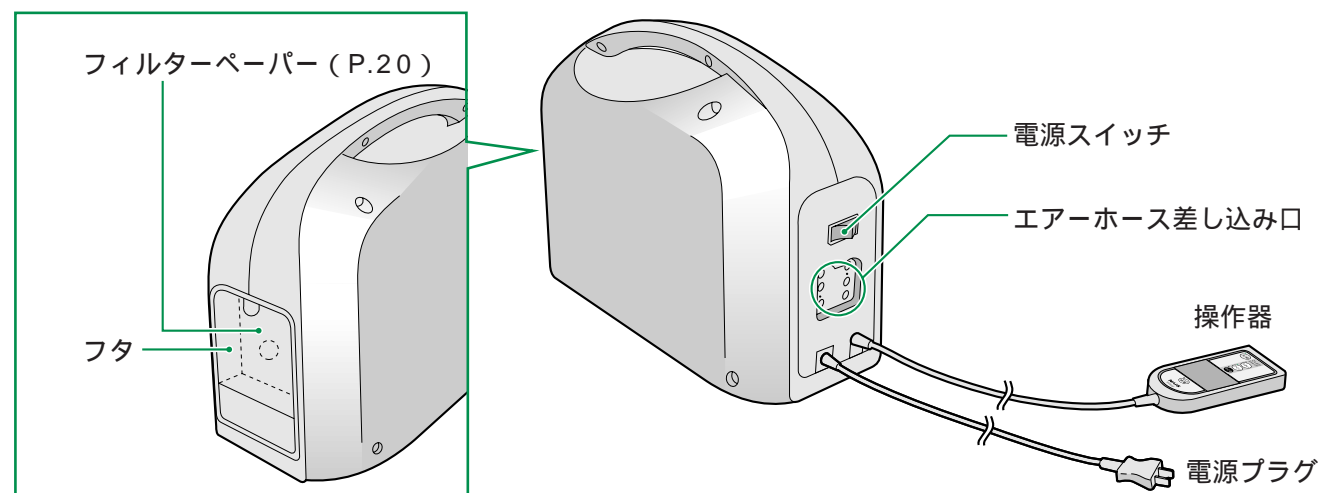

## 操作器

▶表示ランプについては12ページ参照。

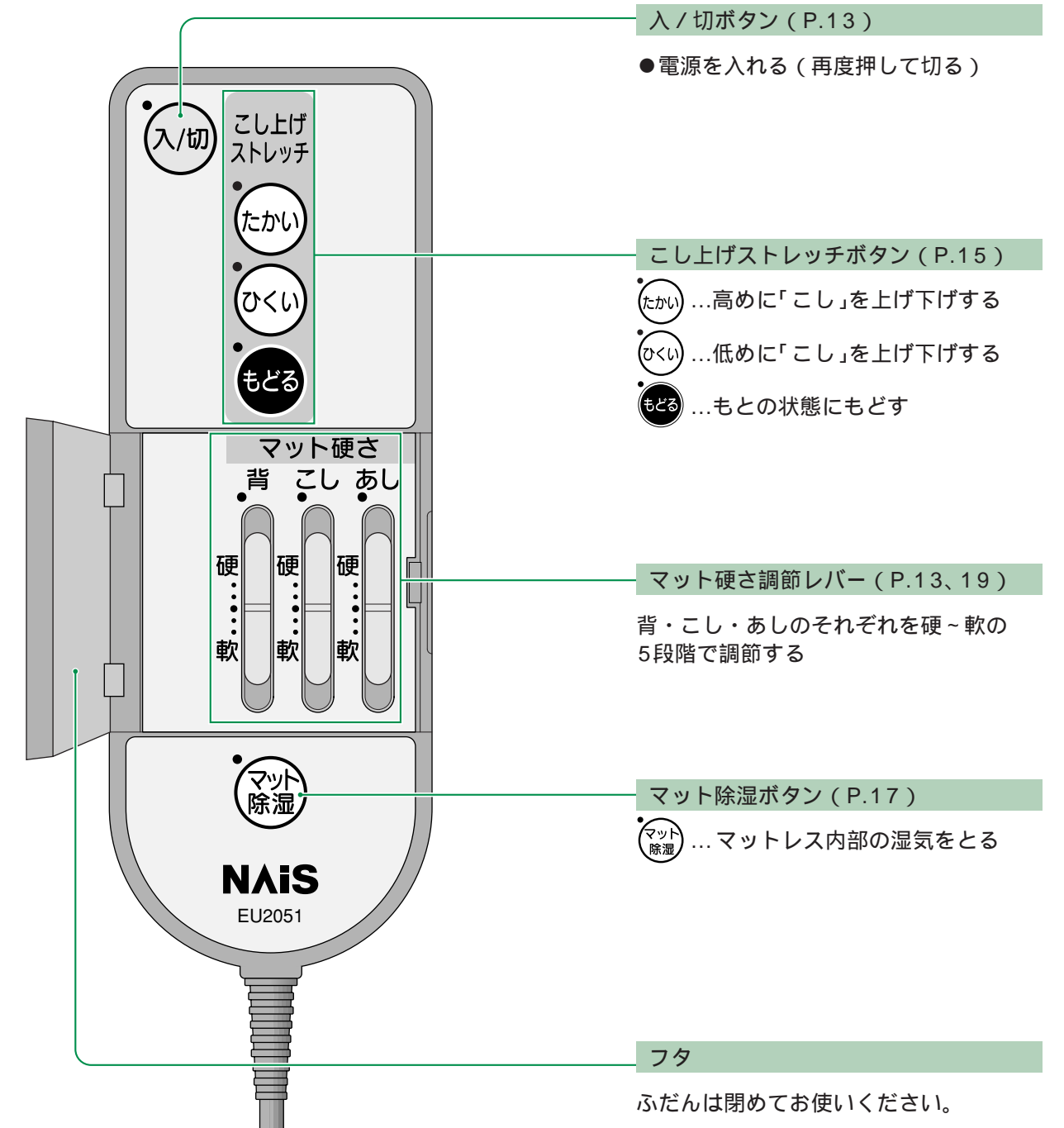

### 機能

- マット硬さ
- こし上げストレッチ
- マット除湿(送風)

# 設置・接続のしかた


## マットレスを置く前に

### Q どこに置けばいいの？

- A**
- 現在のベッド台がそのまま使えます。(サイズを確認してください)  
マットレスの交換のみ必要です。
  - マットレスを置くベッド台(当社オプション品または市販品)を新たに購入すれば使えます。  
(サイズを確認してください)  
P.8「設置のしかた」を参照し、正しく設置してください。
  - たたみや、部屋の床の上でそのままお使いください。  
(清潔さを保つために、ときどき横向きにして底面の通気を行ってください)
- マットレスサイズ** シングル用：幅97cm×長さ196cmを目安にしてください。

### Q どんなベッド台や座板がいいの？

- A**
- 一般ベッド用で、全面に座面があるベッド台を使用してください。
  - 座板が、ネット状やスキ間が大きいベッド台での使用はさけてください。

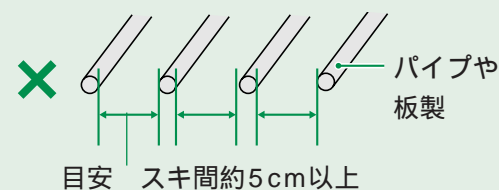

**ご参考** 座板の上に平板を敷いてスキ間をなくせば使用できます。


**注意** ● 介護用ベッドなど背上げのできるベッドでのご使用はできません。

### Q 交換時不要になった古いマットレスはどうすればいいの？


- A**
- 購入された販売店にご相談ください。

## 設置のしかた


次のことに気を付けます

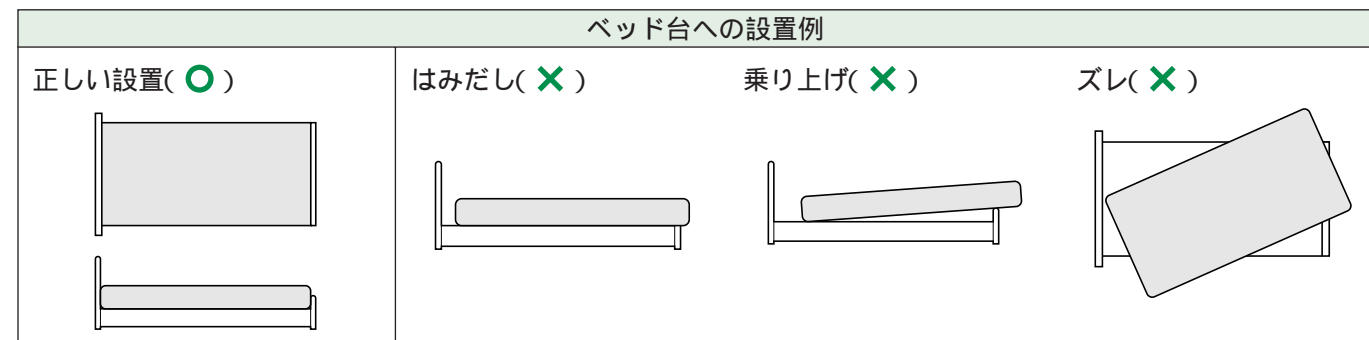


**注意** 敷ふとんを重ねて使わないでください。

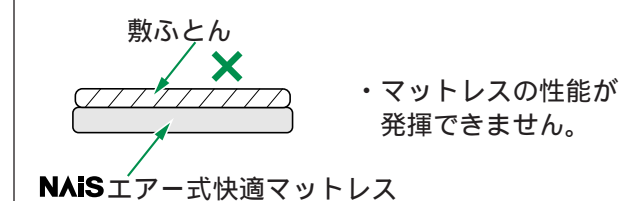


**注意** マットレスを2つ折にしないでください。

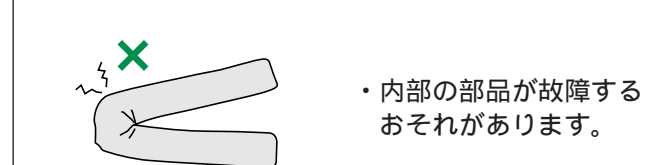

## エアーホースの取出し方向

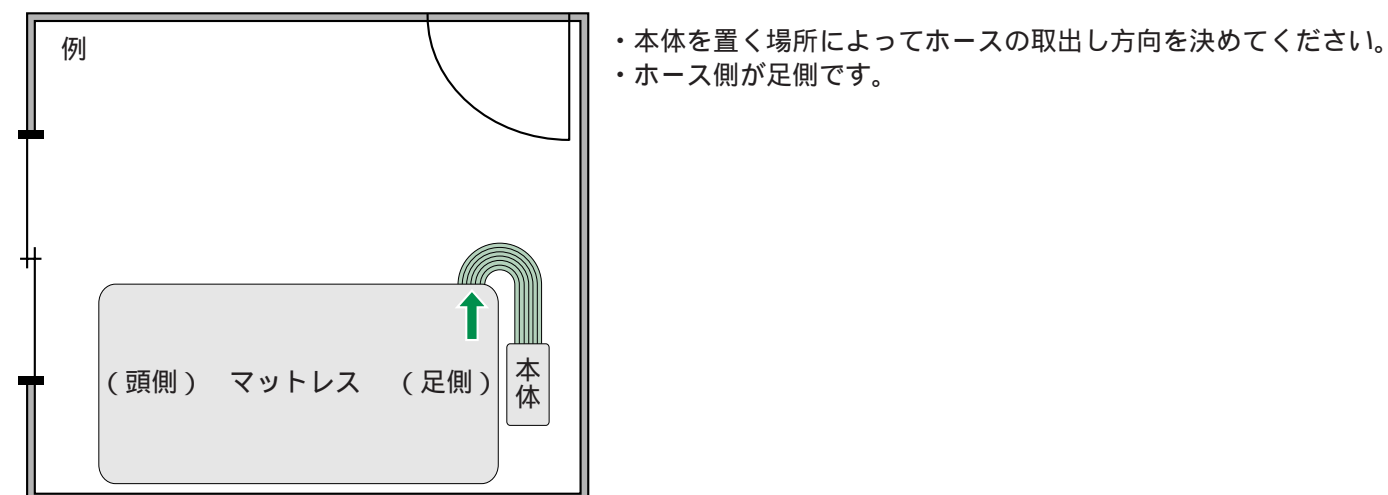

## エアーホースの取出しかた

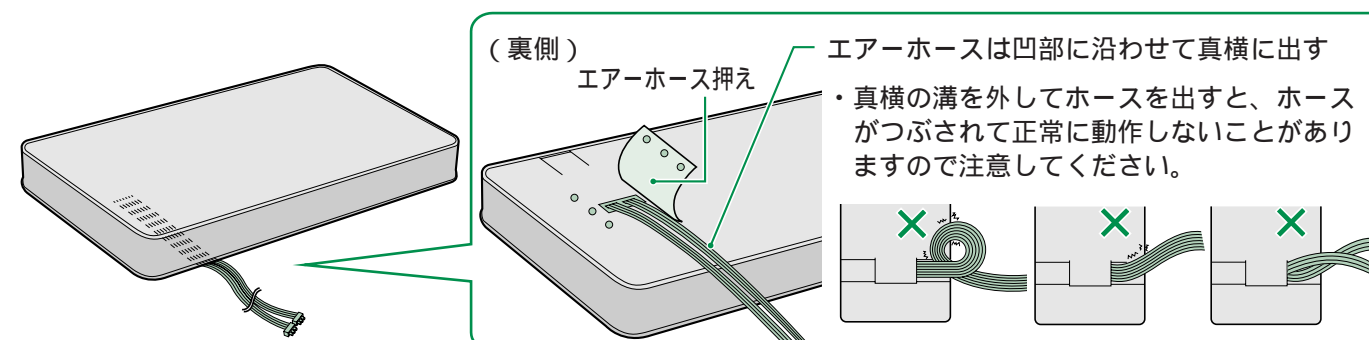




# こんな順序で使います

## 接続のしかた


### 1 マットレスの下からエアークラスを取り出す

- エアークラスの取出しかたについて詳しくは8ページを  
ご参照ください。
- ベッド使用位置に合わせて本体位置を決めてください。

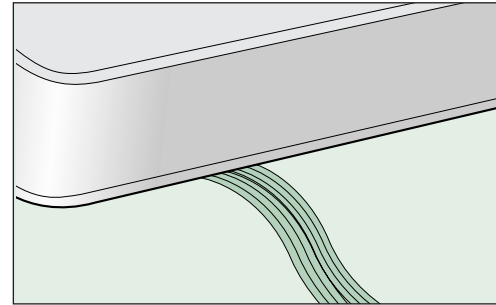


### 2 エアークラスを本体に接続する


- ホースコネクタを本体の右、左の目印を参考にして、  
奥までしっかりと差込んで下さい。

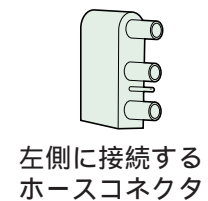

左側に接続する  
ホースコネクタ

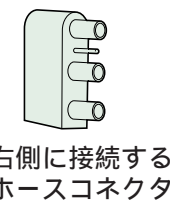

右側に接続する  
ホースコネクタ

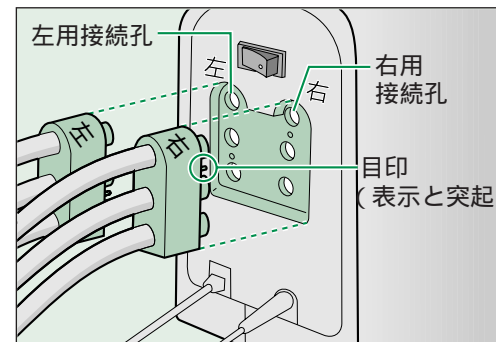


#### 注意

- ホースコネクタを逆に差込むと本体の故障の原因となります。

### 3 電源プラグをコンセントに差し込む


#### ⚠ 注意

- 長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

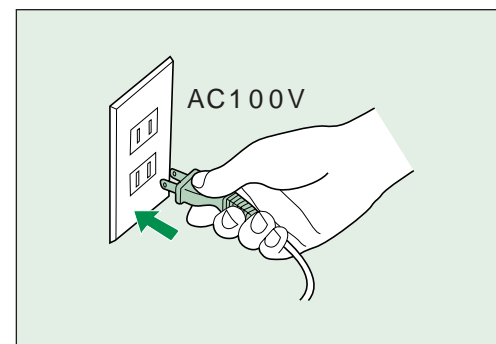

### 4 本体電源スイッチを「入」にする

- 電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源「切」に  
してください。

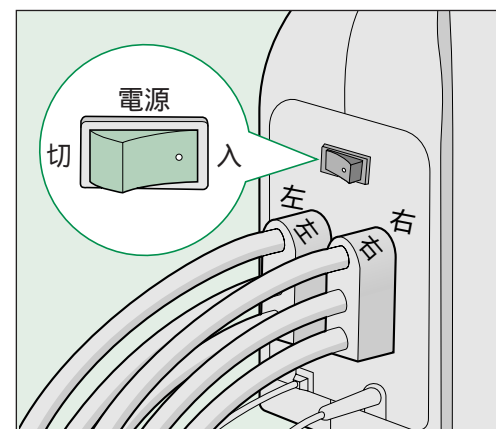

- 1 設置・接続の状態を確認する ————— 7～9ページ参照
- 2 ベッドパッドとシーツを敷く ————— 11ページ参照
- 3 寝る姿勢でマットレスの硬さ調節をする ————— 13ページ参照
- 4 お好みにより操作する
  - こしの疲れに「こし上げストレッチ」 ————— 15ページ参照
- 5 就寝 / 起床
- 6 スッキリさわやかにマットレスの除湿 ————— 17ページ参照

お買い上げ時やしばらく使っていなかったときは


1 2 3 4 5 6 の順にお使いください。

ふだんお使いのときは

4 5 6 の順にお使いください。

約1週間おきに

- 3 のマット硬さ調節を行なってください。
- ・ 4 のお好みの操作や 6 の除湿を行っていない場合のみ。

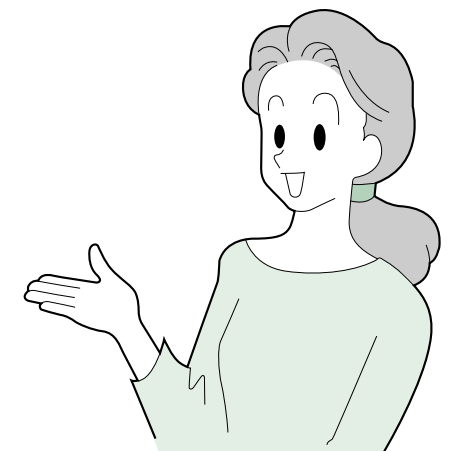


# マットレスの準備

## 1 設置・接続の状態を確認する

● P.7～9参照。


- ① エアーホースは正しく取り付けられているか？
- ② マットレスが折れ曲がったり、ベッド木台等からはみ出していないか？
- ③ 電源プラグが差し込まれているか？
- ④ 本体の電源スイッチが「入」になっているか？

## 2 ベッドパッドとシーツ(共に市販品)を マットレスに敷く

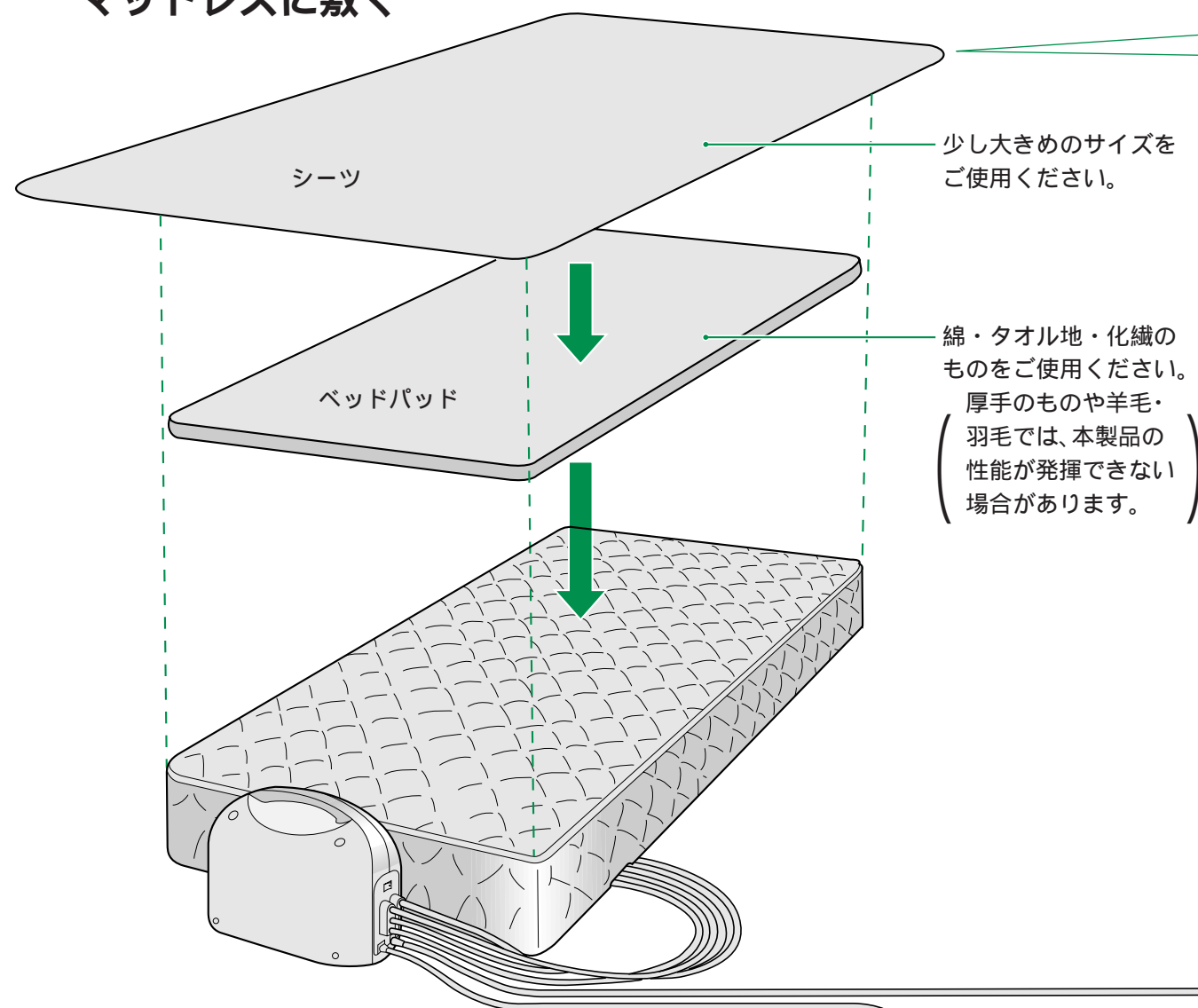

少し大きめのサイズを  
ご使用ください。

綿・タオル地・化繊の  
ものをご使用ください。  
厚手のものや羊毛・  
羽毛では、本製品の  
性能が発揮できない  
場合があります。

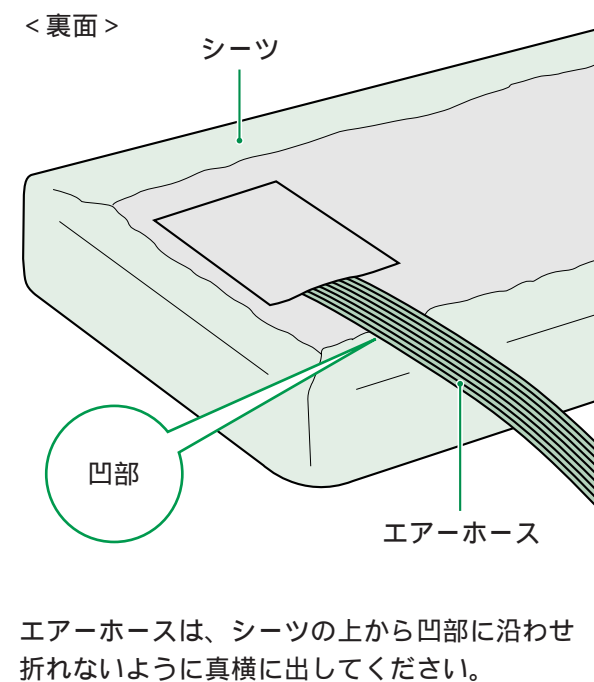

エアーホースは、シーツの上から凹部に沿わせ  
折れないように真横に出してください。

### ⚠ 注意

- 本体は横にして使用しないでください。  
故障のおそれがあります。

# 表示ランプ・タイマー

## 表示ランプ

操作器の表示ランプで動作中の内容がわかります


電源	入/切	点滅	マット硬さ調節中
		点灯	電源「入」中
こし上げストレッチ	たかい	点灯	ストレッチ中
		点灯	ストレッチ中
		点滅	もどる動作中
マット硬さ	背	点滅	マット硬さ調節中
		点灯	マット硬さ調節終了
		点滅	マット硬さ調節中
マット除湿	こし	点灯	マット硬さ調節終了
		点滅	マット硬さ調節中
		点灯	マット硬さ調節終了
マット除湿	あし	点滅	マット硬さ調節中
		点灯	マット硬さ調節終了
		点灯	マット除湿中

## タイマーについて


自動電源「切」のタイミングをお知らせします


電源	入/切	●電源「入」のあと、何も操作 しなかった場合 → 約1時間で「切」
		●電源「入」のあと、他の操作 をした場合 → 他の動作終了後、約1時間で「切」
こし上げストレッチ	たかい ひくい	●「たかい」または「ひくい」を 押した時点から → 約15分で「切」
		●「マット除湿」を押した時点から → 約8時間で「切」

# 快適さを保つ「マット硬さ自動調節」

エアロラックスは  を押すと設定されているマット硬さに自動調節します。

## 1 マットレスに寝た状態で を押す


-  ランプが点滅します。
- 操作器のフタを開けると、背・こし・あしの順にランプが点滅するのがわかります。
- 点滅から点灯に変わると硬さの自動調節が終了です。

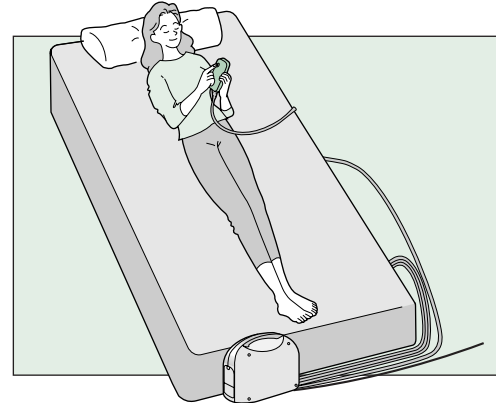

## 2 ランプが点灯に変わったら

つづいて別の操作をしたいとき

目的のボタンを押してください。


- 他に何も操作しないときは、約1時間後に  ランプが消灯します。

次回、硬さ調節するとき


-  を押すと、今調節した硬さに自動調節します。



自分に合った硬さに調節し直したいとき

18ページを参照して調節してください。

- 次回からは  を押すだけで調節し直した硬さに自動調節します。

すぐに「切」にしたいとき

-  を押して終了する（ランプ消灯）

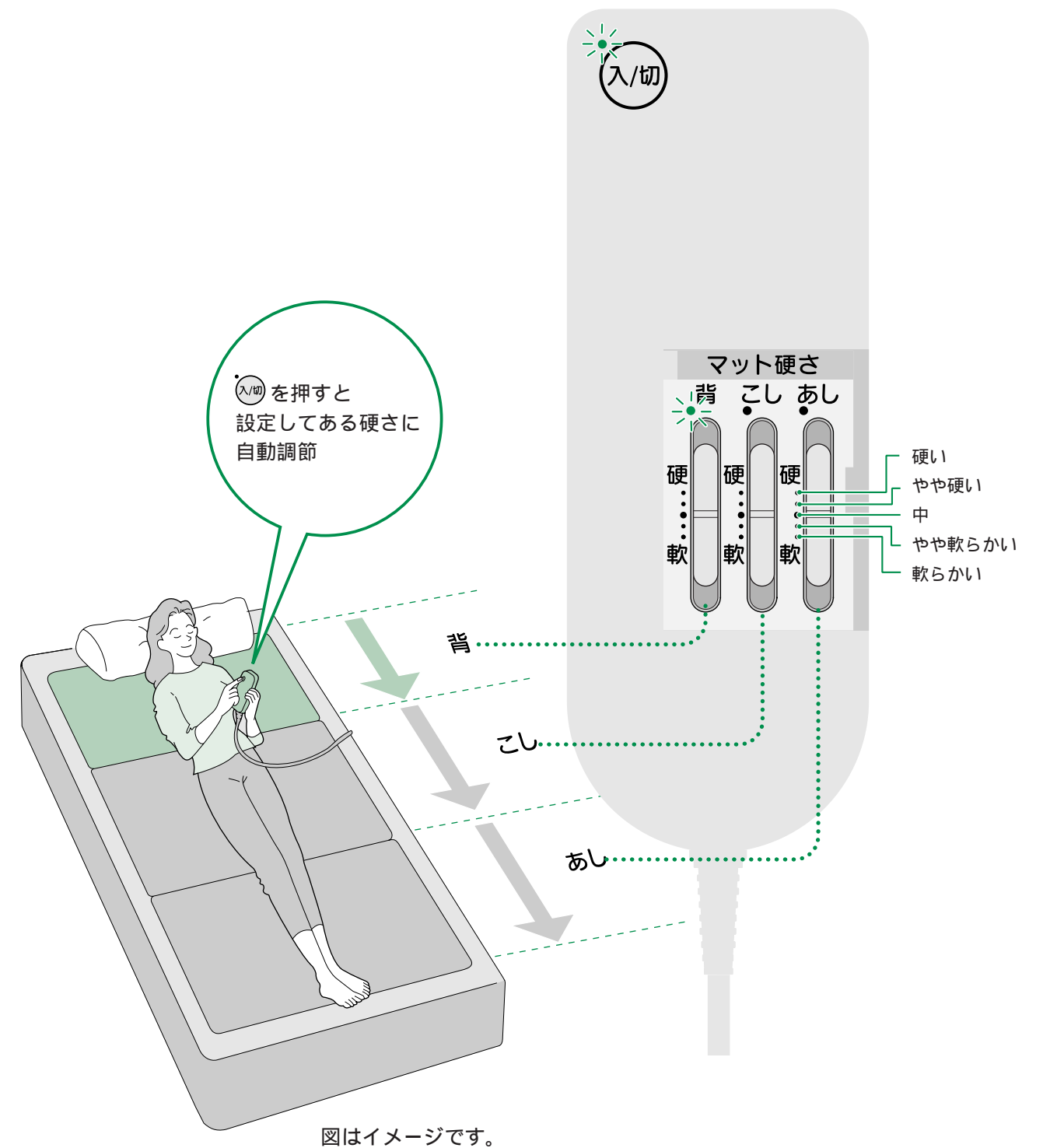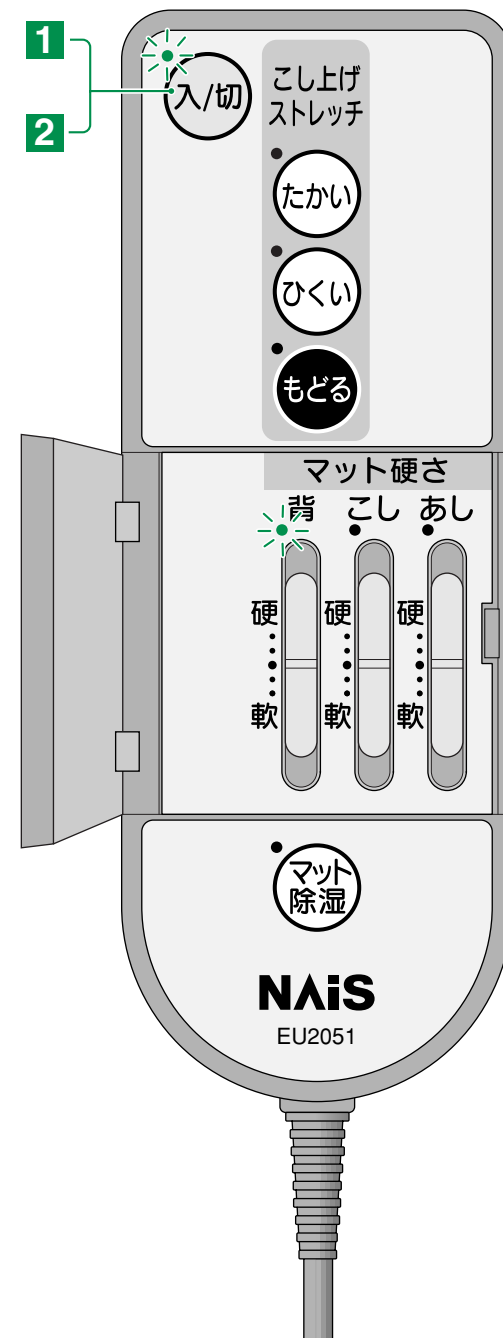




# こしの疲れに「こし上げストレッチ」

就寝前にお使いいただくと、疲れた「こし」の筋肉がほぐされ、やさしく眠りに誘います。  
まずは「ひくい」からお試しいただき、慣れてから「たかい」をお試しください。  
●はじめから「たかい」を選ぶと、「こし」に無理な負担がかかることも考えられます。

## 1 マットレスに寝た状態で「入/切」を押す

- 「入/切」ランプが点滅します。
- 点滅中はマット硬さ自動調節中のため、点灯に変わるまでお待ちください。

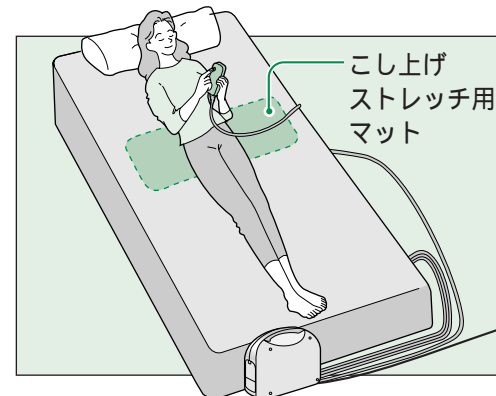


## 2 「入/切」ランプが点灯になったら こし上げストレッチの「ひくい」を押す

- 「ひくい」のランプが点灯し、こし上げストレッチ用マットがふくらみはじめます。


## 3 マットが少しふくらんできたら こしの当たり具合を自分で調節する

- ふくらみが当たって気持ちいい場所に、身体をずらしてください。
- 約45秒おきに「ひくい」の位置とエアが抜けた状態を約15分間繰り返します。

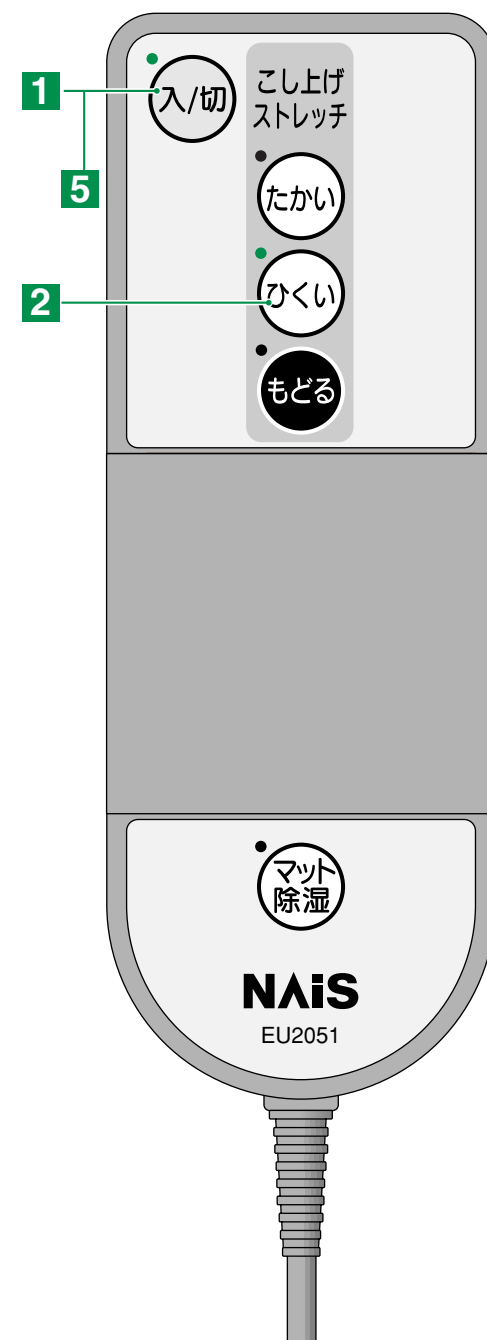

## 4 約15分間ストレッチする

- 約45秒に1回、「ひくい」の位置とエアが抜けた状態を繰り返します。
- 約15分で「ひくい」ランプ消灯→「もどる」ランプ点滅→消灯  
こし上げストレッチ用マットのエアが抜けます。
- 途中で中止したいときは、下記を参照ください。

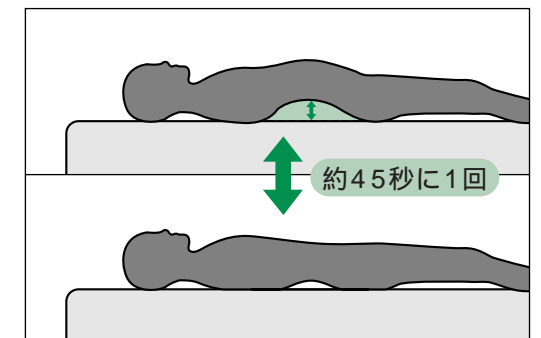

## 5 「入/切」を押して終了する（ランプ消灯）

「ひくい」でご使用中、「たかい」を選ぶと

「たかい」ランプが点灯し、「たかい」の位置までこし上げストレッチ用マットがふくらみます。

タイマーについて

「ひくい」(または「たかい」)を押してから、約15分でタイマーが働き、ストレッチが終了します。

ストレッチ中、他の操作に移りたいとき

- ① こし上げストレッチの「もどる」を押します。
  - 「もどる」ランプが点滅し、こし上げストレッチ用マットのエアが抜けます。
- ② 「もどる」ランプが消灯したら目的のボタンを押してください。

こし上げストレッチを中止したいとき

- 「入/切」を押します。
- 「もどる」ランプが点滅し、「入/切」ランプが消灯します。
  - 「もどる」ランプが消灯して終了します。

### ⚠ 警告

- 「こし」に次のような症状のある方は、「こし上げストレッチ」は使用しないでください。
  - ・腰痛、骨粗しょう症など「こし」に異常のある方
  - ・背骨に異常のある方、背骨がまがっている方
  - ・背骨を手術したことのある方
  - ・上記以外に特に身体に異常を感じているとき
- こし上げは、うつ伏せ、また横向きでは使用しないでください。
- はじめは「ひくい」位置から確認し、次に好みに合わせ「たかい」位置を選んでください。

事故やけがのおそれがあります。


# さわやかに「マット除湿」

マットレス内の湿気を軽減するために、起床後はマット除湿機能をご利用ください。

- マットレス内に風を送り、湿気を外に逃がします。

## 1 掛け布団や毛布類をはずす

- 掛け布団や毛布類を掛けたまま除湿すると、マットレス内の湿気が外に逃げにくくなり、除湿の効果が低くなります。

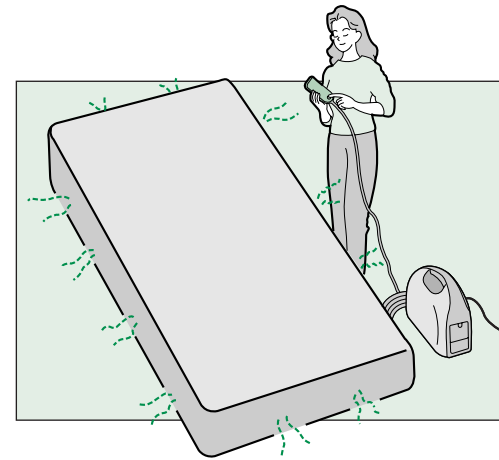

## 2 入/切を押す

- 入/切ランプが点滅します。
- 点滅中はマット硬さ自動調節中のため、点灯に変わるまでお待ちください。

## 3 入/切ランプが点灯になったら マット除湿を押す

## 4 約8時間で除湿が終了し、電源が切れる


- 入/切 および マット除湿のランプが消灯します。

除湿中、他の操作に移りたいとき

入/切を押す（ランプ消灯）、目的のボタンを押してください。

途中で除湿を中止したいとき

入/切を押して終了します。（全ランプ消灯）

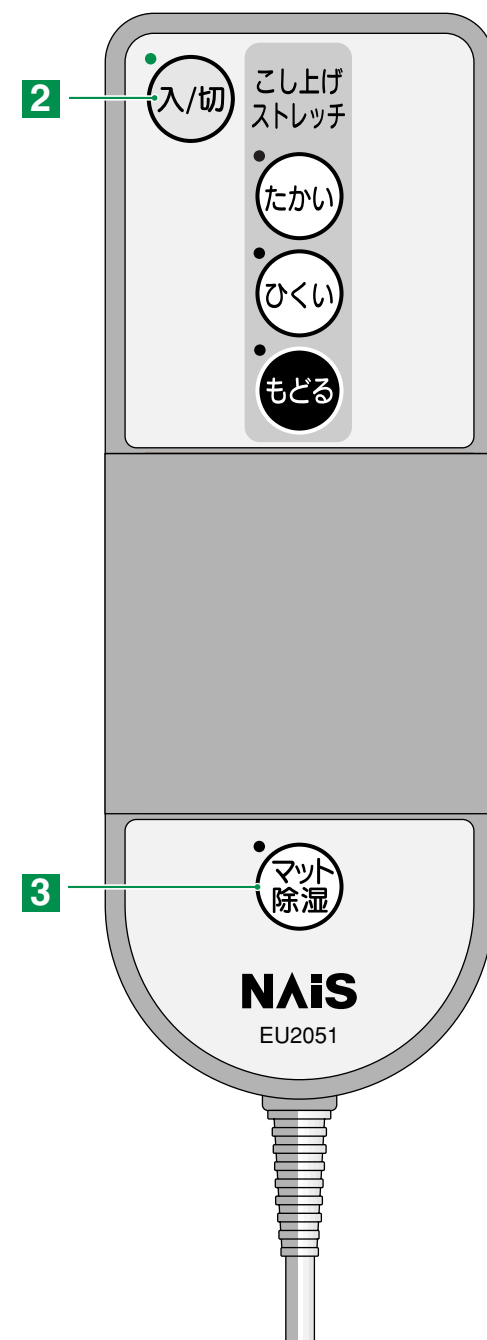

# 自分に合った「マット硬さ」に調節する

自分の体格・体型に合ったマットレスを使用することが安眠の条件です。

ある程度の硬さがあって、身体をきちんと支え正しい寝姿勢・背骨の曲がりを自然に保つこと。

しかも、体圧が分散され、身体の一部を圧迫しないこと・寝返りがうちやすいことなどが良いマットレスの条件です。

## 良い例


理想的なマットレス



不自然な沈み込みが少なく、仰向けに寝たときに背骨のラインが保持できます。  
この状態は体圧がマットレス上に均一に分散され血流もスムーズになり安眠をさそいます。

## 悪い例

やせ気味の人に硬すぎるマットレス

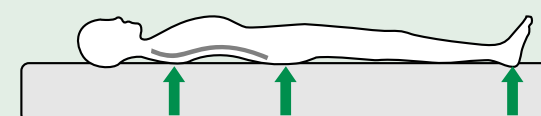

体圧が背部に集中し、うっ血状態をおこす

肥満気味の人に柔らかすぎるマットレス




背部が沈むと背・こしに負担がかかる

エアロラックスは背・こし・あしと3分割に構成されたエアバッグを採用しているため、各部分のマット硬さを自分の体格・体型・好みに合わせて調節することができます。

## マット硬さ選びのポイント

### チェック1 あなたの体格を知りましょう!!

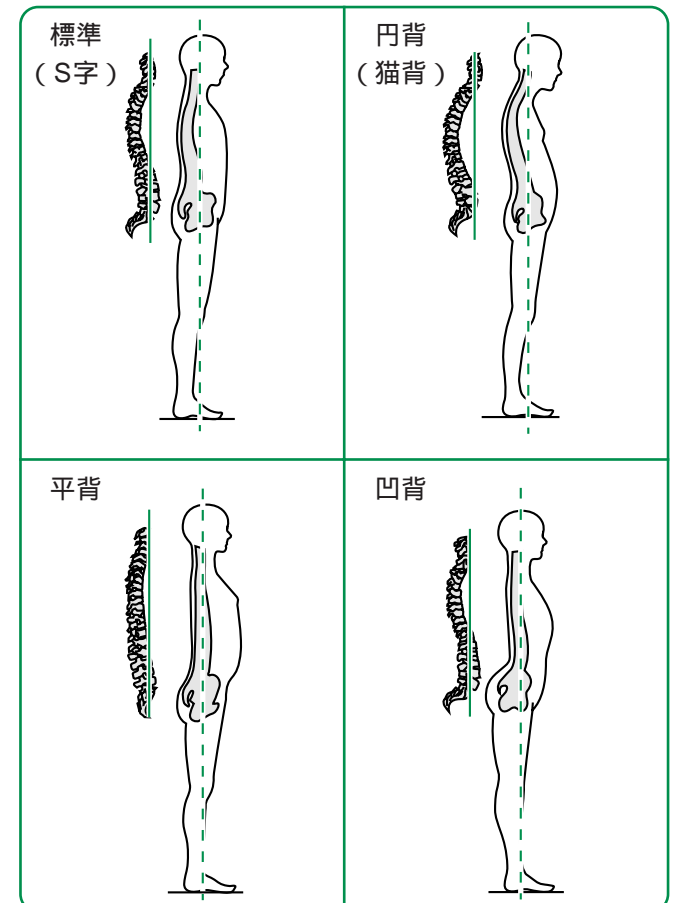

- ① ご家族などの前でヨコ向きに自然に立ち
- ② 上図と見くらべながら判断してもらいましょう。

### チェック2 あなたの体型を知りましょう!!

肥満度( BMI )		体重( kg ) ÷ 身長( m ) ÷ 身長( m )		
	やせ	適正	やや肥満	肥満
判定	20未満	20以上 24未満	24以上 26.4未満	26.4以上


マット除湿／自分に合った「マット硬さ」に調節する

お手入れ

「マット硬さ」を調節する


1 マットレスに寝た状態で 入/切 を押す

- 入/切 ランプが点滅します。

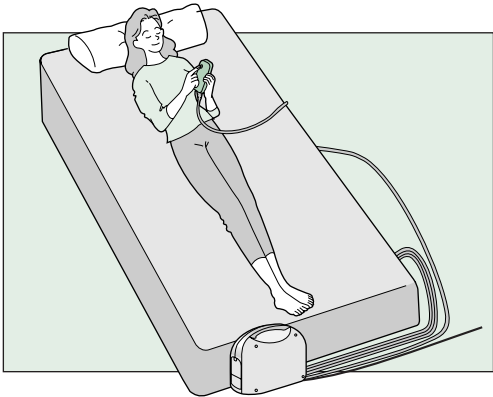

2 マット硬さを調節する

- 下記の表を参考に「背・こし・あし」の硬さを選びます。
- 背 こし あしの順にランプが点滅し、点灯に変わると調節完了です。

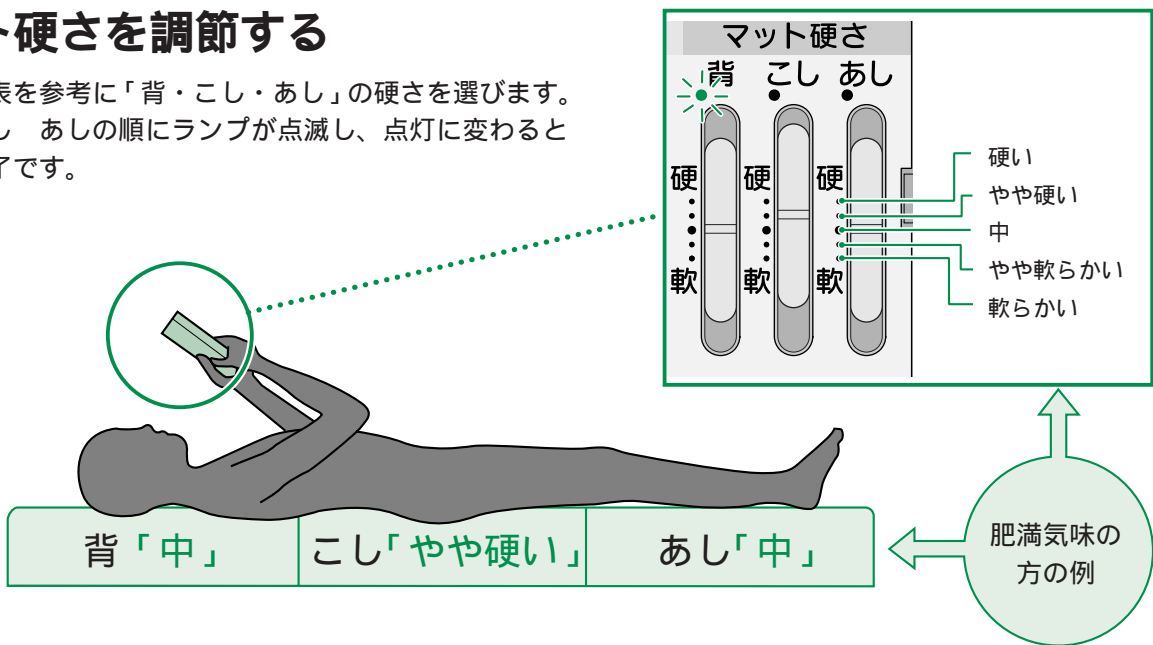

おすすめの硬さ配分

体型	やせ ← → 適正	肥満気味
標準 (S字)	背・あしより、こしを1目盛分硬くする	背・あしより、こしを1目盛硬くする
円背 (猫背)	こし・あしを背より1目盛分硬くする	
平背	背・こし・あしを同じ硬さにする	
凹背		

硬い～軟らかいはお好みに合わせ、硬さ配分は上記の表を参考に調節します。


3 入/切 を押して終了する (ランプ消灯)

- 次回からは 入/切 を押すだけで、今調節した硬さに自動調節してくれます。(13ページ参照)

マットレス

通気・換気

- ・たたみや床に置いてお使いの場合は、ときどきマットレスを横にして、通気を行ってください。
- ・定期的に寝室の窓を開け放して、新鮮な空気にあててください。特に梅雨時期にはカビや悪臭が発生しやすくなりますので十分注意してください。

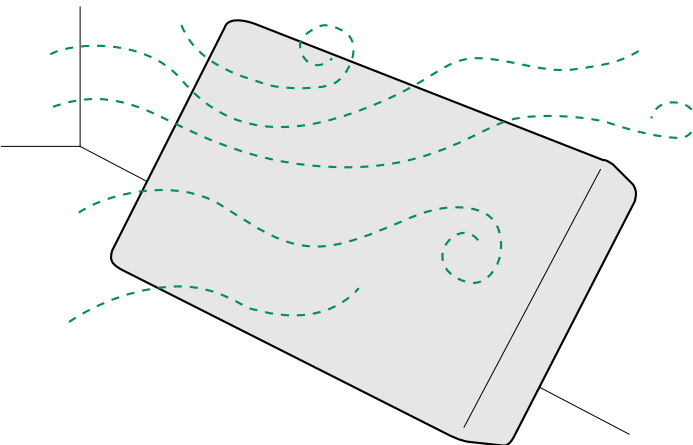


- **ホコリ** は電気掃除機で取り除いてください。(ファイバークッションなどの詰め物が入っていますから、叩かないでください)
- **表面の汚れ** は
  - ① 中性洗剤を3～5%くらいにぬるま湯でうすめる
  - ② 柔らかい布をひたす
  - ③ よく絞って表面を叩くように拭き取る
  - ④ 水でひたした布をよく絞って洗剤液をふき取る
  - ⑤ 柔らかい乾いた布で軽く拭く
  - ⑥ そのあと自然乾燥させてください。(ドライヤーなどで乾燥させないでください)
- **湿気** に敏感なため、必ずベッドパッドとシーツを敷いて使い、シーツはこまめに取り替えたり洗濯を行ってください。
- **マット除湿** をこまめに行ってください。

本体

フィルターペーパーの交換

- 交換の目安は半年です。  
(汚れのひどい場合は、早めに交換してください)
- ① 電源「切」の状態コンセントを抜く
  - ② 本体のフタをはずす(指で引っ掛けて手前に引く)
  - ③ ネジをゆるめ押え板をとる
  - ④ 新しいフィルターペーパーと交換する
  - ⑤ 押え板をもとの位置にもどしネジをしめる
  - ⑥ フタを取付ける

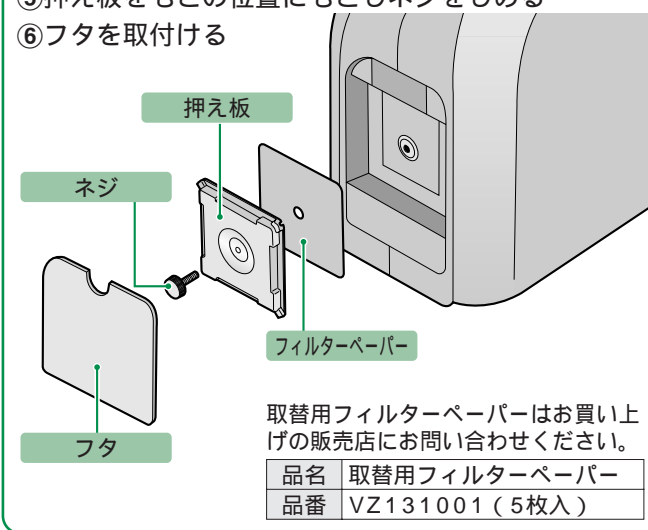

取替用フィルターペーパーはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

品名	取替用フィルターペーパー
品番	VZ131001 (5枚入)

自分に合った「マット硬さ」に調節する

お手入れ

故障かな？と思ったとき

症状	原因と処置
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？</li><li>●本体の電源スイッチが「切」になっていませんか？</li></ul>
こし上げが動かない	<ul style="list-style-type: none"><li>●「入／切」スイッチが点滅していませんか？</li><li>●他の動作を使用していませんか？</li><li>●本体のエア－ホースの接合部が抜けていませんか？</li><li>●エア－ホースが折れ曲がったり、つぶされたりしているところはありませんか？</li></ul>
マット除湿ができない	
硬さ調節のレバーを操作しても反応がない	<ul style="list-style-type: none"><li>●本体のエア－ホースの...<ul style="list-style-type: none"><li>・接合部が抜けていませんか？</li><li>・折れ曲がったり、つぶされたりしているところはありませんか？</li></ul></li><li>●エア－ホースが本体の正しい方向にしっかり奥まで差し込まれていますか？</li></ul>
エア－ポンプの音が気になる	<ul style="list-style-type: none"><li>●圧力調節を行うときに多少のポンプ音がでますが、異常ではありません。</li><li>●夜間ポンプの動作音が気になる場合は、操作器の「入／切」を切ってください。</li></ul>
使用中にコトコト音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>●こし上げストレッチ機能を使用の際、または圧力調整の際に発生する音であり、異常ではありません。</li><li>●こし上げストレッチ機能を使用後や、硬さ設定完了後は、動作音はしません。</li></ul>
エア－マットレスのこすれあう音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>●エア－マットレスの特性上、エア－マットレスがへこんだり、戻ったりするときにこすれあう音がすることがありますが、異常ではありません。</li></ul>
マットレス内部から「シュー」音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>●マット除湿使用時は、マットレス内部から空気音（「シュー」音）がしますが、異常ではありません。</li></ul>
[ マット除湿 ] を押しても風が出ていない	<ul style="list-style-type: none"><li>●送風量は感じませんが、マット内で機能しており、異常ではありません。</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>●破損してしまった</li><li>●電源コード、プラグが異常に熱い</li></ul>	

点検後なお異常がある

ただちに使用を中止

●お願い●

このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

⚠ 警告

- 絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをするおそれあり

定格 / 仕様

品番		EU2051
寸法	マットレス部	全幅970×全長1960×厚さ180mm (シングルサイズ)
	本体	幅約170×長さ約372×高さ約275mm
質量 (重量)	マットレス部	約14.5kg
	本体	約6.7kg
動作	硬さ調節	背、こし、あし 3分割 硬～軟 5段階硬さ調節
	こし上げ	●高さ(人載時)=約5cm、3cmの2段階 ●上昇～保持～下降の反復動作 (約45秒/サイクル) ●15分タイマー付
	マット除湿 (送風)	●マットレス内送風 ●8時間タイマー付
定格電源		AC100V、50/60Hz
消費電力 (待機時)		35W (約2.5W)
操作器		EU2051用
主要 構成材	マットレス部	(詰もの) ポリエステル100% (エア－バッグ) ナイロン、ポリウレタン樹脂
	本体	(ハウジング) ABS樹脂

故障かな？と思ったとき

定格 / 仕様



# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

## 保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。

保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。（一般家庭用以外に使用された場合は除きます）

## 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの**NAIS** エアー式快適マットレスの補修用性能部品の製造打切り後5年保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼される時

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の21頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

### ●保証期間中は

（出張修理対象品）

お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### ●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### ●アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

地球の環境保護の為、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

松下電工株式会社 アクティブ・ライフ開発事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

Y.No1